





Descubre el poder de V-Shaping

Tu equipo de remodelación facial y corporal, de última generación para tu centro de estética.

reducción de celulitis
lifting facial
remodelado corporal

Tecnología avanzada para ofrecer resultados visibles desde las primeras sesiones

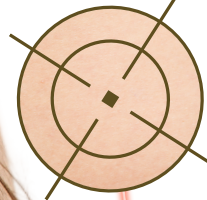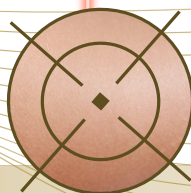

Tecnología al servicio de la belleza

5 tecnologías en un solo equipo

- ✓ radiofrecuencia bipolar
- ✓ láser infrarrojo
- ✓ cavitación
- ✓ vacío pulsado
- ✓ rodillos mecánicos

Este sistema trabaja en diferentes profundidades:

FACIAL

- ✓ Mejora la textura y el tono de la piel.
- ✓ Lifting facial y rejuvenecimiento.

CORPORAL

- ✓ Reduce la celulitis y reafirma la piel.
- ✓ Remodela la figura corporal.




FACIAL

- Eliminación de arrugas
- Tensado de la piel
- Lifting facial
- Textura y tono de la piel

CORPORAL

- Contorno corporal
- Eliminación de celulitis
- Adelgazamiento corporal
- Reducción de la circunferencia

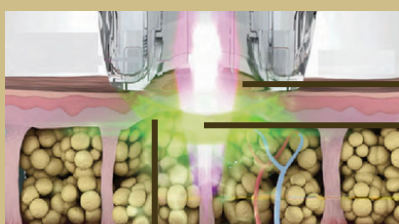

El tejido objetivo se acerca al punto de energía mediante vacío.

La luz infrarroja (IR) calienta directamente el área objetivo.

La radiofrecuencia bipolar (RF) guía el calor de manera uniforme por el área objetivo, de modo que se calienta más rápido sin dañar la piel.

¿Por qué incorporar V-Shaping en tu centro de estética?

Engloba tratamientos faciales y corporales con diferentes tecnologías en un mismo equipo.

- ✓ **Resultados efectivos**
Visible en solo 1-3 sesiones.
- ✓ **Tratamiento no invasivo**
Perfecto para clientes con poco tiempo.
- ✓ **Ideal para todo tipo de clientes**
Recomendado para personas que buscan mejorar su aspecto de forma natural y sin cirugía.
- ✓ **Tratamientos rápidos**
15 a 30 minutos por sesión.
- ✓ **Alta demanda**
Responde a la tendencia de tratamientos no invasivos.



Máxima versatilidad y facilidad de uso

Cuatro manípulos diseñados para adaptarse a cada zona del cuerpo:



Grande

Abdomen, flancos, glúteos y muslos.



Pequeño

Rostro y contorno de ojos.



Mediano:

Brazos, piernas, espalda y cuello.



Grande

Moldeador corporal.

Tratamientos adaptados a las necesidades de cada cliente.



¿Qué esperar después del tratamiento?

Resultados efectivos, tratamientos de alta demanda, rápidos, no invasivos, ideales para todo tipo de clientes.

¿Qué precauciones tomar después del tratamiento?

Se desaconseja tomar el sol y broncearse, ya que se incrementa la sensación de calor después de la sesión.

¿Cuáles son las contraindicaciones?

No existen contraindicaciones importantes para el tratamiento.

Para clientes con marcapasos/desfibrilador, embarazadas o en período de lactancia o con problemas de salud graves, se recomienda consultar con su médico antes de comenzar el tratamiento.

**Un universo de
posibilidades al
alcance de la mano
con V-Shaping.**



Pantalla	Pantalla táctil de 12 pulgadas	Velocidad del rodillo	0-36 r/m
Modo de trabajo	Pulso	Frecuencia de RF	1 MHz
Longitud de onda del láser	940nm	Frecuencia de Cavitación	40KHZ
Manípulos	4 manípulos - 6 puntas	Intensidad de vacío	30-85(Kpa)
	123mm x 88mm; 66 x 40mm;	Voltaje	AC220V±10%
	43 x 30mm; 17 x 10mm; 14 x 9mm;		10A 50HZ/AC110V±10%
	10 x 4mm (sólo para facial)		10A 60Hz



MUNDOSTETIC SL
Av. Castelao, 50 · 36209 - Vigo

☎ 672 077 674

✉ comercial@mundostetic.com